

TERMÓMETRO INFRARROJO SIN CONTACTO

IT-901



desde 1967
AVÁNTIKA

www.avantika.com.co/tienda – ventas@avantika.com.co – cotizaciones@avantika.com.co

3015491549




Termómetro infrarrojo sin contacto


IT-901

La onda de transmisión del cuerpo humano es de 5 - 13 μm . De acuerdo con este principio, es posible determinar la temperatura del cuerpo humano a partir de la temperatura de la frente o del oído seleccionando el modo de medición adecuado en el dispositivo.

- ✓ **Multi función:** Medición digital de oído/frente, ambiente y objeto, también incluye la función de visualización de la hora.
- ✓ **Higiénico, práctico y fácil de usar:** Solo necesita limpiar el sensor antes y después de medir.
- ✓ **Rápido y preciso:** Adopte la tecnología de medición de temperatura de la tercera generación que será más exacta a la temperatura del cuerpo medida con la frecuencia de medición 512 veces por segundo.
- ✓ **Visualización automática según la temperatura.** La última memoria de temperatura corporal se mostrará en la pantalla cuando se encienda.
- ✓ **Color de la pantalla según la temperatura.**
 - Verde:** Temperatura medida es entre el rango de 32.0-37.4 °C
 - Naranja:** El rango es de 37.5 - 38.0 °C
 - Rojo:** El rango es de 38.0 - 42.9 °CSe guardarán 15 mediciones
- ✓ **Función de compensación de temperatura:** El usuario puede ajustar la diferencia de temperatura con una temperatura de referencia utilizando la función de calibración, para obtener un resultado más preciso.

MODELO	IT-901
Rango de temperatura	Cuerpo: 32.0 °C - 42.9 °C (89.6 °F - 109.2 °F) Objeto: 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F)
Precisión	Cuerpo: ± 0.2 °C/0.4 °F Objeto: ± 0.5 °C/0.9 °F
Resolución	0.1 °C/0.1 °F
Condiciones operativas	Cuerpo: 10.0 °C - 40.0 °C (50.0 °F - 104.0 °F) Rh $\leq 80\%$ Objeto: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Rh $\leq 80\%$
Almacenamiento	-25.0 °C - 55.0 °C (-13.0 °F - 131.0 °F) Rh $\leq 95\%$
Batería	1 x 3V CR2032
 0434	El producto cumple con la Directiva Europea sobre dispositivos médicos MDD 93/42/ECC



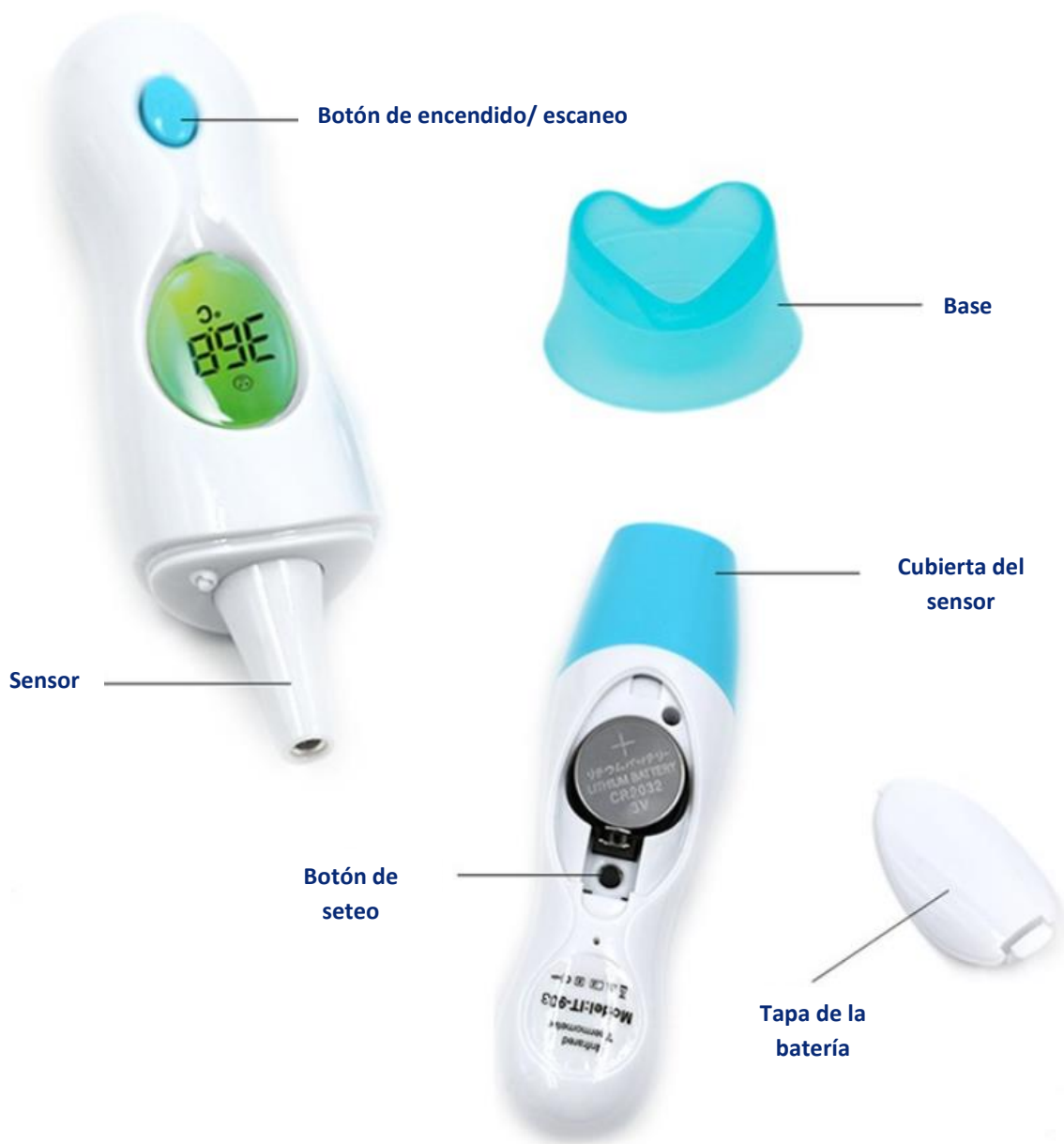

Contenido:

- ✓ 1 Termómetro
- ✓ 1 Base
- ✓ 1 Batería CR2032
- ✓ 1 Manual del usuario

