

# MASCARILLAS REUTILIZABLES

FX



**invimã**  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

desde 1967  
**AVÁNTIKA**

[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

 3015491549 




# Mascarillas reutilizables de uso no hospitalario

*FX*

La mascarilla reutilizable FX está hecha con tela 100% poliéster con doble capa entretejidas. Esta mascarilla es transpirable con un alto nivel de filtración gracias a su tejido compacto que permite filtrar pequeñas partículas en el aire desde 10 micrones. La fibra de poliéster de la tela cumple con el **Estándar 100 Oeko-tex Clase 1**.

Esta mascarilla ayuda a evitar las partículas de alérgenos y el polvo gracias a su alto nivel de eficacia de filtración que puede provocar enfermedades de las vías respiratorias. Su diseño ligero permite usarlo con comodidad.

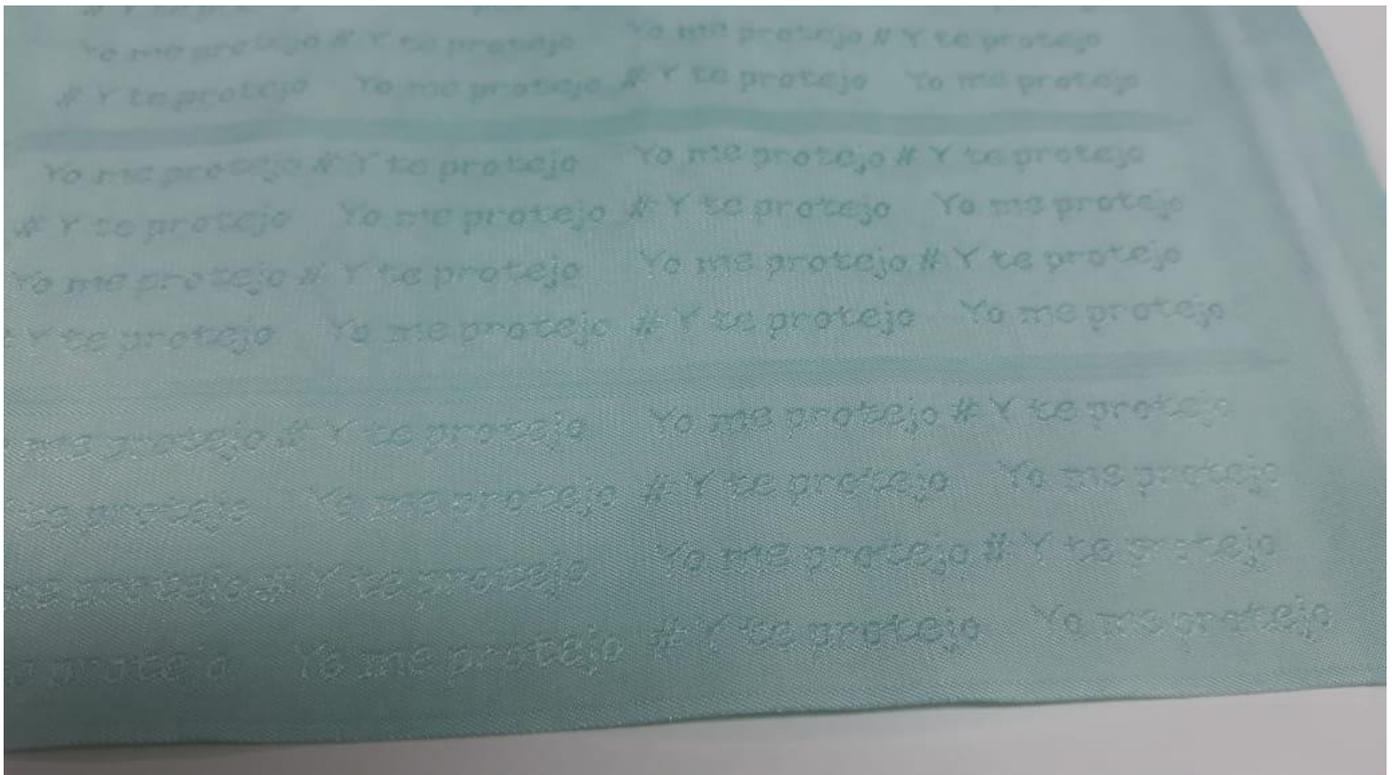

- **Manejamos 2 referencias:**

**AV03077:** Color azul

**AV03108:** Color verde

[www.avantika.com.co/tienda](http://www.avantika.com.co/tienda) – [ventas@avantika.com.co](mailto:ventas@avantika.com.co) – [cotizaciones@avantika.com.co](mailto:cotizaciones@avantika.com.co)

 **3015491549** 



## Especificaciones:

- ✓ Reutilizable
- ✓ Antifluido
- ✓ Material respirable
- ✓ La densidad del tejido se puede ajustar para aumentar la capacidad de filtración según los requisitos del cliente
- ✓ Se puede hervir y esterilizar para reutilizar si es necesario.
- ✓ Se puede lavar en agua tibia
- ✓ La tela resiste 50 lavadas y el caucho resiste hasta 20 lavadas. (Se recomiendan 20 lavadas)
- ✓ **Puede esterilizarse en autoclave (20 veces máximo)**
- ✓ Resistente a la limpieza con alcohol
- ✓ Resistente al lavado con cloro diluido al 5%.
- ✓ Alta resistencia a la tensión en cualquier dirección.
- ✓ Suave al tacto
- ✓ Baja repelencia a líquidos
- ✓ Resistencia a la saturación del sudor
- ✓ Protege contra bacterias, hongos y virus.
- ✓ Material antialérgico
- ✓ Capacidad de retención de partículas de 10 micrones
- ✓ Fibras 100% poliéster cumple el estándar 100 Oeko-tex Clase 1
- ✓ La pieza de tela 100% poliéster se puede reciclar.

### Detalles del producto:

**Construcción:** Tafeta de doble capa entrelazadas

**Grosor de la fibra:** 50 Denier

**Retención de Partículas:** 10 micrones

### Nota Legal:

Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o afección de salud.



## USO CORRECTO DE LA MÁSCARILLA



1



Lavar bien las manos antes de ponerse la mascarilla.



2

Coloque el lado de color hacia afuera y el lado blanco hacia el rostro.



3

Coloque primero en una de las orejas el elástico y luego en la otra.



4

Asegúrese de cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla.



5

Para retirar, tómelas únicamente por los elásticos y lávela o límpiela con alcohol para reutilizarla.

[Video](#)

